

Brugermanual

aurora

Aurosa LED-lysterapimaske (PBM)

Sådan bruger du masken

1. Oplad masken ved at frakoble kontrolenheden.
Isæt opladerkablet og tilslut det til en USB-strømkilde (5V 1A–2A eller højere, fx en iPhone-oplader).
2. Tilkobl kontrolenheden til masken. Masken skal være 100 % opladet inden første brug. Herefter bør den altid være opladt 50–80 % af hensyn til batteriets levetid.
3. Rens og tør dit ansigt.
4. Placer masken på dit ansigt og juster stropperne.
5. Tænd masken ved at holde ON/OFF-knappen nede i 2 sek.
6. Vælg behandling:
Rød: Øger celleaktiviteten og stimulerer kollagen- og elastindannelsen. Reducerer linjer og rynker. Forbedrer hudens elasticitet og nedsætter inflammation.
Nærinfrarød (NIR): Øger blodtilførslen i de dybereliggende vævslag og tilfører næringsstoffer.
Rød + NIR: Kombinationsbehandling for optimal cellestimulerende effekt.
Grøn: Forbedrer hudtonen og har en beroligende effekt på huden. Lindrer irritation og kløe.
Blå: Reducerer bakterieforekomst og betændelsestilstande på hudens overflade.
7. Indstil behandlingstiden (10 min. anbefales). Ved sart hud: Start med 5 min. og observer din huds reaktion.
8. Masken slukker automatisk efter endt behandling.
Du kan herefter påføre hudpleje som normalt.

Vedligeholdelse og rengøring

- Sluk masken og frakobl kontrolenheden før rengøring.
- Tør masken af med en vådserviet eller fugtig klud.
- Brug ikke kemiske eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Opbevar masken på et tørt sted. Undgå direkte sollys og kontakt med vand. Maske og ledning må ikke bøjes hårdt.

Fejlfinding

Masken tænder ikke: Tjek, om batteriet er opladet.

Masken oplader ikke: Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet.

Masken slukker før tid: Kontrolenheden kan overophede, hvis den dækkes til. Undgå dette, og lad den køle af før du genstarter.

LED-lys flimrer: Tjek, om pulserende lys er slået til.

Stop straks med at bruge enheden, hvis du mener, den er defekt og kontakt aurosa.

Sikkerhed og advarsler

- Må ikke anvendes af børn og unge under 15 år.
- Må ikke anvendes af personer med epilepsi.
- Undgå at se direkte ind i lyset. Brug øjenbeskyttere.
- Brug ikke masken, hvis din hud er rød, hævet eller beskadiget, eller hvis du har en hudlidelse, som du ikke kender årsagen til, eller er i behandling med medicin, der gør huden lysfølsom. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.
- Stop brugen, hvis du oplever ubehag eller irritation.

Garanti

Produktet har 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke skader forårsaget af misbrug, brug af forkert strømforsyning, forkert brug eller uautoriseret reparation. LED-dioderne har en levetid på ca. 10.000 timer.

Specifikationer

Effekt: 5W. Input: 5V 2A.

Opladningstid: 2-3 timer (ved brug af 40W-lader, 2-3A).

Materiale: Silikone + LED.



Bølgelængder:

Rød: 630 nm - Grøn: 520 nm - Blå: 460 nm.

Nærinfrarød (NIR): 850 nm.

Kassens indhold:

- Aurosa LED-lysterapimaske
- Opbevaringspose
- USB-opladerkabel og kontrolenhed
- Justerbare stropper
- Øjenbeskyttere
- Brugervejledning

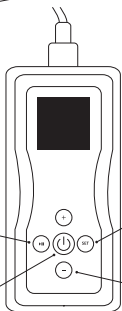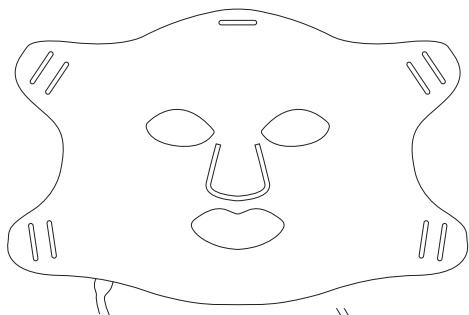

2. Start/pause
Tryk for at aktivere/
pause behandlingen

1. Tænd/sluk
Tryk for at tænde/slukke

3. Indstillinger
Menu for farve, tid,
styrke og pulsfunktion.
Tryk +/- for at indstille.

4. Justering
Tryk +/- for at ændre
farve, tid, styrke og puls.

Find mere information på aurosa.dk

Producentinformation: Aurosa ApS
Designet i Danmark. Fremstillet i P.R.C.